

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА-АКУШЕРА

по забору пупочного канатика




Банк стволовых клеток





Забор пупочного канатика производят только **после** забора пуповинной крови!

Пожалуйста, используйте для обработки биоптата только спиртовые салфетки **из комплекта!**

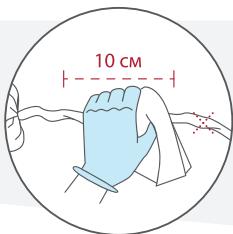

Отступив на несколько сантиметров от места введения иглы (в направлении плаценты), обработайте канатик полностью спиртовыми салфетками на протяжении **примерно 10 см**, удаляя загрязнения.

Наложите на обработанный участок канатика первый пупочный зажим. Затем на расстоянии **5 см от зажима** по направлению к плаценте наложите на канатик второй пупочный зажим.

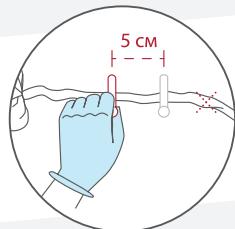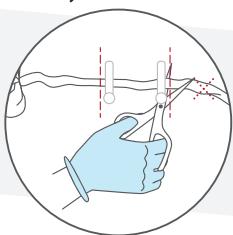


Пересеките ножницами отрезок пуповины **снаружи** от пупочных зажимов.

Поместите в контейнер с транспортной средой биоптат канатика, **плотно** закрутите крышку.



Укажите на контейнере **ФИО роженицы**.

Поместите контейнер в транспортный контейнер и положите на временное хранение **в холодильную камеру** холодильника с температурой от **+ 2 °C до + 8 °C**.

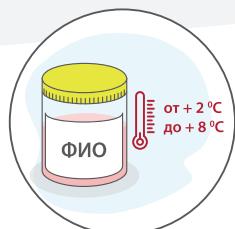

После забора пупочного канатика контейнер должен храниться при температуре от + 2 °C до + 8 °C в холодильнике!

Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы № Л041-01137-77/00332098 от 13 июня 2019 года.
Гемабанк является товарным знаком ПАО «ММЦБ»

119333, Россия, Москва, улица Губкина, 3 к1

www.gemabank.ru

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ГЕМАБАНКА®



Биострахование ребенка -

не праздный вопрос, а важное решение, которое принимается один раз и на всю жизнь. Именно такое решение предстоит принять будущим родителям. А задача врача - высказать свое мнение и проинформировать будущую роженицу о свойствах пуповинной крови. Быть компетентным в этой теме.

Гемабанк® приглашает к сотрудничеству

медицинские центры, женские консультации, родильные дома и врачей акушеров - гинекологов из всех регионов РФ для информирования общественности о возможности сбора пуповинной крови при родах.

Направления сотрудничества



Организация совместных мероприятий, симпозиумов, конференций



Обучение врачей



Информационная работа с пациентами

Как стать партнером Гемабанка® и принять участие в обучении и совместных мероприятиях?

8 (800) 500-46-30